




## Bilancia Analitica ETERNITY

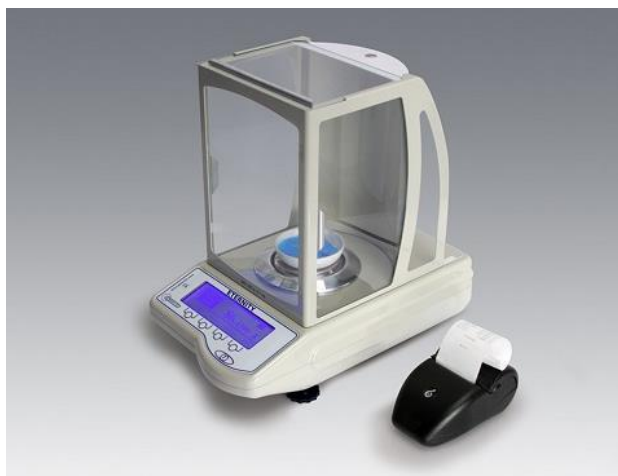

### Descrizione

ETERNITY è una bilancia analitica a compensazione magnetica affidabile e adatta all'ambiente di laboratorio, la sua tastiera a membrana impermeabile è resistente agli acidi ed è di facile ed immediata operatività grazie ai tasti TARE, PRINT OFF, MENU.

Le funzioni attivabili tramite il tasto MENU, sono le letture nelle diverse unità di misura per la pesata, come:

g (grammi), lb (libbre), oz (once), ct (carati), pcs (pezzi), % (percentuale),  
mo (Momme), t (tola), ozt (troy once), GN (grain), tLH (Tael Hong Kong),  
tLT (taiwan).

L'Indicazione del raggiungimento del peso stabile la si può facilmente leggere sul display LCD. Il display adotta un sistema di lettura semplificata, mettendo le cifre decimale in dimensioni di carattere ridotte.

L'accesso per pesate è sotto il piano della bilancia, e la calibrazione può essere eseguita sia con masse interne, o con masse esterne su richiesta.

Il tempo di risposta può essere selezionato: lento o veloce.

## Dati Tecnici

Assorbimento:	200 mA
Alimentazione:	100 - 240 VAC
Peso	7 kg
Dimensioni ( L x H x P )	216 x 360 x 380 mm
Dimensioni camera ( L x H x P )	180 x 240 x 170 mm
Uscita seriale:	RS232 I/O configurabile
Temperatura di funzionamento:	18 / 35°C

	Portata g	Divisione mg	Linearità mg	Ripetibilità mg	Tempo di Risposta	Piatto mm
100 CAL	120	0,1	± 0,2	± 0,05	4/6 sec.	Ø 80
200 CAL	220	0,1	± 0,2	± 0,05	4/6 sec.	Ø 80
300 CAL	320	0,1	± 0,2	± 0,05	4/6 sec.	Ø 80

## Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
ETERNITY	100 - 240 VAC	100 CAL
ETERNITY	100 - 240 VAC	200 CAL
ETERNITY	100 - 240 VAC	300 CAL

## Accessori

Descrizione	Codice
Dispositivo per la determinazione della densità di liquidi e solidi	-
Comandi a distanza per l'azionamento del segnale di stampa, tara, ecc.	-
Esecuzioni con portate speciali	-
Stampante	-