

Puntali per pipette premium

Puntali per pipette Qualitix® da 10 µl a 10 ml

Il programma di puntali per pipette Qualitix® è interamente incentrato sulla qualità, sulla flessibilità e sulla compatibilità.

Una linea completa per il rilascio accurato di liquidi, adatta non solo alle pipette Socorex ma anche a quelle di tutti i principali marchi. L'assortimento delle confezioni (buste, rack e sistema *tipfill*™ per il riempimento di rack), unitamente ad una scelta di tipologie di puntali con e senza filtro, offre una versatilità molto apprezzata.

I puntali Qualitix® e le micropipette Socorex sono l'abbinamento perfetto per risultati di esami eccellenti.

- Ampia scelta, qualità superiore, autoclavabili
- Buste, rack e sistema *tipfill*™ per il riempimento dei rack
- Coerenza da lotto a lotto
- Certificazione di assenza di nucleasi, endotossine e ATP
- Imballi compatti, meno spazio richiesto sul banco
- Ampia compatibilità con le micropipette dei maggiori marchi

Campionature omaggio su richiesta



Punta fine e smussata

L'estremità smussata **a** del puntale riduce in modo significativo l'adesione di gocce di liquido. L'estremità sottile e morbida della punta fine **b** permette il deposito di piccole quantità di liquido, aumentando in questo modo, la riproducibilità durante il pipettaggio ripetuto. L'estremità lunga e morbida è ideale per *gel loading* **c**.



Protezione da aerosol - Nessuna contaminazione

I puntali con filtro includono un filtro idrofobico con porosità di 10 µm che trattiene qualsiasi contaminante, proteggendo quindi efficacemente sia la pipetta, sia il campione. L'elevata purezza dei puntali e la sterilizzazione con raggi gamma sono certificati.



Low retention - Massimo recupero del liquido

I puntali *low binding* **a** sono realizzati in resina priva di silicone che riduce notevolmente l'adesione alla superficie e garantisce il massimo recupero del liquido. Disponibili nei modelli con capacità da 10, 200 e 1000 µl, in rack sterili e non sterili. Essendo altresì certificati privi di proteasi, essi risultano essere ideali per la ricerca proteomica e per la gestione accurata di liquidi viscosi.

Livello *bioproof*™ Qualitix®

La linea Qualitix® è priva di DNase, RNase, Pirogeni (Endotossine) e ATP. I puntali con filtro dispongono di un'ulteriore certificazione per l'assenza di DNA umano e proteasi rilevabili.




Visualizza certificato

Sistema di riempimento dei rack

Le confezioni *tipfill™* sono state appositamente sviluppate per semplificare il riempimento dei *rack*. Si tratta di una soluzione pratica ed economica per qualsiasi laboratorio, che riduce al minimo le interruzioni del lavoro. Ogni inserto da 96 puntali viene trasferito istantaneamente su di un *rack* vuoto senza alcun rischio di contaminazione. Il coperchio di trasferimento mantiene i puntali puliti e ne impedisce l'oscillazione durante il riempimento.



Vedere
il video

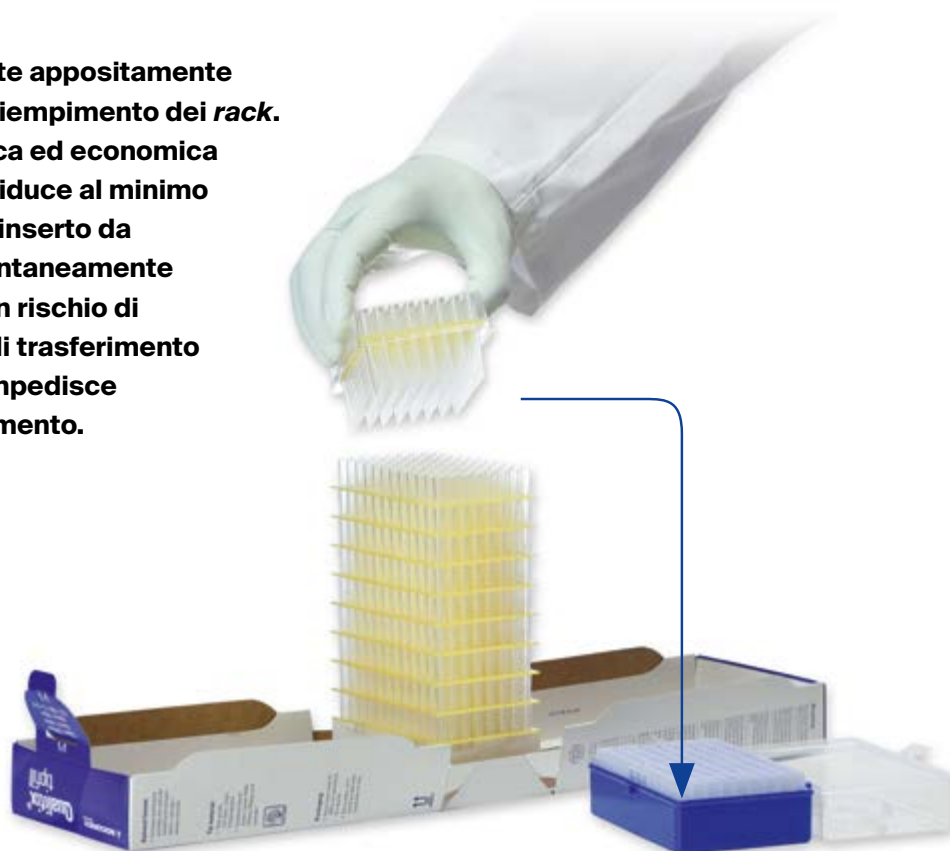

Opzioni di imballo

I puntali sono disponibili in buste, in *rack* con coperchio a cerniera e nel sistema *tipfill™* per il riempimento dei *rack*.

Riduzione dello spazio

L'intelligente scatola *tipfill™* richiudibile occupa decisamente meno spazio rispetto a quello occupato da *rack* tradizionali e produce una quantità inferiore di rifiuti in plastica. Ciò ha un impatto diretto sul bisogno di spazio per la conservazione, sui costi di spedizione e sull'ambiente.

Aspetti ambientali

Le confezioni sono ottimizzate per garantire una buona protezione mentre si impiega una quantità minima di cartone.



Guida alle applicazioni

Tipo di puntale	Caratteristiche	Vantaggi
Puntali standard	Qualità superiore, universali, si adattano in modo ottimale alle pipette.	Impiego abituale nel pipettaggio quotidiano con pipette Socorex e di altri marchi.
Puntali con filtro	Come sopra, includono un filtro di protezione idrofobico in HDPE con porosità 10 µm.	Protezione efficiente da contaminazione da aerosol, per pipetta e campione.
Puntali <i>low binding</i>	Materiale speciale atto a ridurre al minimo la ritenzione sulla superficie.	Gestione accurate di liquidi viscosi e densi e di campioni di proteine e peptidi.
Puntali per <i>gel loading</i>	Lunghi, con punta sottile e morbida, puntali universali.	Distribuzione precisa di campioni in un'area ristretta senza danneggiare la struttura del gel.
Puntali lunghi	Puntali lunghi, e universali.	Accesso facile in provette profonde e strette mentre si limita il contatto con le pareti interne della provetta.
Puntali <i>saver</i>	Puntali affidabili, universali.	Confezione sfusa per il contenimento della spesa, indicata per progetti che comportano grande uso di puntali.

Puntali per pipette premium


Informazioni per gli ordini – selezione di puntali Qualitix®

Puntali da 10 - 20 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	31.4	Neutro	Micropuntali ultra da 10 µl, a punta fine, graduati, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3090.0010B
		Neutro	Micropuntali ultra da 10 µl, a punta fine, graduati, autoclavabili		12x 96 / rack	10 pacchi	3090.0010R
		tipfill	Sistema <i>tipfill</i> ™ da 10 µl incl. micropuntali ultra a punta fine, graduati		13x 96 / pacco	10 pacchi	3090.0010T
			Rack vuoto per puntali da 10 / 200 µl da impiegare con il sistema <i>tipfill</i> ™, autoclavabile		10 / pacco	10 pacchi	3070.0210ER
		Neutro	Micropuntali ultra da 10 µl, a punta fine, graduati, autoclavabili	✓	12x 96 / rack	10 pacchi	3090.0010RS
	38.1	Neutro	Micropuntali lunghi da 20 µl, a punta fine, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3020.0010B
		Neutro	Micropuntali lunghi da 20 µl, a punta fine, autoclavabili		10x 96 / rack	10 pacchi	3020.0010R
	71.0	Neutro	Puntali capillari da 10 µl per <i>gel loading</i> , autoclavabili		4x 204 / rack	N / A	302.0010GR
	38.3	Neutro	Micropuntali ultra da 10 µl, versione saver, a punta fine, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3070.0010B
			Rack vuoto per autoclavare i micropuntali ultra da 10 µl versione saver cod. 3070.0010B		1 / pacco	N / A	3070.0010ER

Puntali con filtro da 10 - 20 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	31.4	Neutro	Micropuntali ultra da 10 µl, con filtro, a punta fine, graduati	✓	12x 96 / rack	10 pacchi	3090.0010FRS
	38.1	Neutro	Micropuntali lunghi da 20 µl, con filtro, a punta fine	✓	10x 96 / rack	10 pacchi	3020.0010FRS

Puntali low binding (proteine) da 10 - 20 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	31.4	Neutro	Micropuntali ultra da 10 µl, <i>low binding</i> , a punta fine, autoclavabili		12x 96 / rack	10 pacchi	3090.0010PR
		Neutro	Micropuntali ultra da 10 µl, <i>low binding</i> , a punta fine, autoclavabili	✓	12x 96 / rack	10 pacchi	3090.0010PRS
	38.1	Neutro	Micropuntali lunghi da 20 µl, <i>low binding</i> , a punta fine, autoclavabili		10x 96 / rack	10 pacchi	3020.0010PR
		Neutro	Micropuntali lunghi da 20 µl, <i>low binding</i> , a punta fine, autoclavabili	✓	10x 96 / rack	10 pacchi	3020.0010PRS

Puntali con filtro da 20 - 100 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	49.6	Neutro	Puntali con filtro da 20 µl, punta smussata	✓	10x 96 / rack	10 pacchi	3080.0020FRS
	49.6	Neutro	Puntali con filtro da 100 µl, punta smussata	✓	10x 96 / rack	10 pacchi	3080.0100FRS

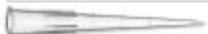Puntali da 200 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	49.6	Neutro	Puntali universali da 200 µl, punta smussata, graduati, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3070.0200B
		Neutro	Puntali universali da 200 µl, punta smussata, graduati, autoclavabili		10x 96 / rack	10 pacchi	3070.0200R
		tipfill	Sistema <i>tipfill</i> ™ da 200 µl incl. puntali universali a punta smussata, graduati		10x 96 / pacco	10 pacchi	3070.0200T
			Rack vuoto per puntali da 10 / 200 µl da impiegare con il sistema <i>tipfill</i> ™, autoclavabile		10 / pacco	10 pacchi	3070.0210ER
		Neutro	Puntali universali da 200 µl, punta smussata, graduati, autoclavabili	✓	10x 96 / rack	10 pacchi	3070.0200RS
	49.6	Giallo	Puntali standard da 200 µl, punta smussata, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3290.0200B
		Giallo	Puntali standard da 200 µl, punta smussata, autoclavabili		10x 96 / rack	10 pacchi	3290.0200R
		Giallo	Puntali standard da 200 µl, punta smussata, autoclavabili	✓	10x 96 / rack	10 pacchi	3290.0200RS
	82.5	Neutro	Puntali capillari da 200 µl per <i>gel loading</i> , autoclavabili		6x 96 / rack	8 pacchi	3080.0200GR
	49.5	Neutro	Puntali da 200 µl, versione saver, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3070.0200B
		Giallo	Puntali da 200 µl, versione saver, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3270.0200B
			Rack vuoto per autoclavare i puntali da 200 µl versione saver cod. 3070.0200B e 3270.0200B		1 / pacco	N / A	3270.0200ER

Puntali con filtro da 200 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	51.2	Neutro	Puntali universali da 200 µl con filtro, punta smussata	✓	10x 96 / rack	10 pacchi	3070.0200FRS
	83.8	Neutro	Puntali lunghi da 200 µl con filtro, a punta fine	✓	6x 96 / rack	8 pacchi	3080.0200LFRS
Puntali low binding (proteine) da 200 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	49.6	Neutro	Puntali universali da 200 µl, low binding, graduati, autoclavabili		10x 96 / rack	10 pacchi	3070.0200PR
		Neutro	Puntali universali da 200 µl, low binding, graduati, autoclavabili	✓	10x 96 / rack	10 pacchi	3070.0200PRS
Puntali da 350 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	58.8	Neutro	Puntali standard da 350 µl, autoclavabili		1000 / busta	N / A	308.0350B
		Neutro	Puntali standard da 350 µl, autoclavabili		10x 96 / rack	N / A	308.0350R
Puntali con filtro da 300 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	58.8	Neutro	Puntali standard da 350 µl con filtro	✓	10x 96 / rack	N / A	308.0300FR
Puntali da 1000 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	88.9	Neutro	Puntali universali da 1000 µl, a punta fine, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3070.1000B
		Neutro	Puntali universali da 1000 µl, a punta fine, autoclavabili		6x 96 / rack	8 pacchi	3070.1000R
		tipfill	Sistema tipfill™ da 1000 µl incl. puntali universali a punta fine		5x 96 / rack	10 pacchi	3070.1000T
			Rack vuoto per puntali da 1000 µl da impiegare con il sistema tipfill™, autoclavabile		6 / pacco	8 pacchi	3070.1000ER
		Neutro	Puntali universali da 1000 µl, a punta fine, autoclavabili	✓	6x 96 / rack	8 pacchi	3070.1000RS
	75.9	Blu	Puntali standard da 1000 µl, punta smussata, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3190.1000B
		Blu	Puntali standard da 1000 µl, punta smussata, autoclavabili		6x 96 / rack	8 pacchi	3190.1000R
		Blu	Puntali standard da 1000 µl, punta smussata, autoclavabili	✓	6x 96 / rack	8 pacchi	3190.1000RS
	75.9	Neutro	Puntali standard da 1000 µl, punta smussata, graduati, autoclavabili		1000 / busta	10 buste	3090.1000B
		Neutro	Puntali standard da 1000 µl, punta smussata, graduati, autoclavabili		6x 96 / rack	8 pacchi	3090.1000R
	70.9	Neutro	Puntali da 1000 µl, versione saver, autoclavabili		1000 / busta	N / A	307.1000B
		Blu	Puntali da 1000 µl, versione saver, autoclavabili		1000 / busta	N / A	317.1000B
			Rack vuoto per autoclavare i puntali da 1000 µl versione saver cod. 317.1000B and 307.1000B		1 / pacco	N / A	317.1000ER
Puntali da 1000 µl con filtro	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	88.9	Neutro	Puntali universali da 1000 µl con filtro, a punta fine, autoclavabili	✓	6x 96 / rack	8 pacchi	3070.1000FRS
Puntali low binding (proteine) da 1000 µl	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	88.9	Neutro	Puntali universali da 1000 µl, low binding, a punta fine, autoclavabili		6x 96 / rack	8 pacchi	3070.1000PR
		Neutro	Puntali universali da 1000 µl, low binding, a punta fine, autoclavabili	✓	6x 96 / rack	8 pacchi	3070.1000PRS
Macropuntali da 2, 5, 10 ml	Misura mm	Descrizione		Sterile	Imballo		Codice
		Colore	Stile		Confezione	Scatola	
	115.5	Neutro	Macropuntali da 2 ml, autoclavabili		2x 250 / busta	N / A	312.02
		Neutro	Macropuntali da 2 ml, autoclavabili		30x 250 / busta	N / A	312.02XLB
			Rack vuoto per 50x macropuntali da 2 ml, autoclavabile		2 / pacco	N / A	312.02ER
	123.2	Neutro	Macropuntali da 5 ml, graduati, autoclavabili		2x 250 / busta	N / A	312.05B
		Neutro	Macropuntali da 5 ml, graduati, autoclavabili		25x 250 / busta	N / A	312.05XLB
		Neutro	Macropuntali da 5 ml, graduati, autoclavabili		2x 50 / rack	N / A	312.05R
	150.0	Neutro	Macropuntali da 10 ml, graduati, autoclavabili		3x 100 / busta	N / A	312.10
		Neutro	Macropuntali da 10 ml, graduati, autoclavabili		40x 100 / busta	N / A	312.10XLB
		Neutro	Rack vuoto per 24x macropuntali da 10 ml, autoclavabile		4 / pacco	N / A	312.10ER

B = busta, E = vuoto, F = filtro, G = gel, L = lungo, P = low binding (proteine), R = rack, S = sterile, T = sistema di riempimento tipfill™, XLB = puntali sfusi in busta

Puntali per pipette premium

Tabella di compatibilità Socorex

La tabella indica la combinazione ottimale tra Qualitix® e pipette Socorex.		Acura® manual e Acura® electro																						
		815					825 / 826 / 926							835 / 936			855 / 956							
		Fino a 10 µl	10 y/15/20 µl	Da 25 a 100 µl	Da 120 a 200 µl	Da 250 a 1000 µl	01 - 2 µl	0.5 - 10 µl	1 - 10 µl (V)	2 - 20 µl	5 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	0.2 - 2 ml	0.5 - 5 ml	1-10 ml	0.5 - 10 µl	2 - 20 µl	5 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	40 - 350 µl	
Ultra- e micropuntali da 10-20 µl	Prefisso																							
	3090	●					●	●											●					
	3020	●					●	●											●					
	302	● ²						● ²																
	3090	●					●	●											●					
	3020	●					●	●												●				
307	●					●	●											●						
Puntali da 20 - 100 µl		Prefisso																						
	3080		●						●	●	● ¹									● ¹				
	3080			●							●	●	● ¹							●	●	● ¹		
Puntali da 200 µl		Prefisso																						
	3070		●	●	●				●	●	●	●	●							●	●	●		
	3290		●	●	●				●	●	●	●	●							●	●	●		
	3080				●					●	●	●	●											
	3070			●	●								●									●		
	3080				●								●									●		
	307/327		●	●	●				●	●	●	●	●							●	●	●		
Puntali da 300 - 350 µl		Prefisso																						
	308				●							●	●										●	
	308				●								●										● ¹	
Puntali da 1000 µl		Prefisso																						
	3070					●								●										
	3190					●								●										
	3090					●								●										
	3070					●								●										
	307/317					●								●										
Macropuntali da 2, 5 e 10 ml		Prefisso																						
	312														●									
	312															●								
	312																●							

¹ Fino al volume massimo ² Per volumi > 2 µl

Tabella di compatibilità con altri marchi

[illegible]

¹ Fino al volume massimo del puntale I nomi dei marchi appartengono ai rispettivi proprietari.