



## Agitatore Riscaldante Multiposizione AM4 & AM4X



### Descrizione

L'agitatore magnetico riscaldante a 4 posizioni AM4 dispone di piastre riscaldanti in lega di alluminio accuratamente rivestiti con uno speciale strato protettivo per garantire una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie, nonché una eccellente resistenza agli agenti chimici.

AM4X offre anche la possibilità di essere collegato fino a 4 termoregolatori digitali VTF per il controllo diretto della temperatura della soluzione in lavorazione.

Regolazione elettronica della velocità: fino a 1500 giri/min

Volume di agitazione (H<sub>2</sub>O): fino a 15 litri per posizione

Temperatura: fino a 370 °C

Controreazione: velocità costante anche al variare della viscosità

### Dati Tecnici

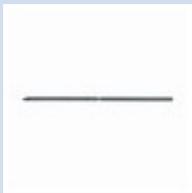
Struttura	metallica con verniciatura epossidica
Piastra riscaldante:	lega di alluminio con speciale protezione
Diametro della piastra riscaldante:	155 mm
Numero posizioni agitazione:	4
Potenza	2550 W

Peso	8,3 Kg
Dimensioni ( L x H x P )	715x115x246 mm
<b>PRESTAZIONI</b>	
Regolazione elettronica dei giri	fino a 1500 rpm per ogni piastra
Regolazione della temperatura:	da temperatura ambiente a 370°C per ogni piastra
Capacità di agitazione (H2O):	fino a 15 litri (x4)
Sistema di agitazione:	magnete trascinate di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo
Controreazione:	velocità costante

## Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
AM4	230 V / 50-60 Hz	F20500420
AM4X	230 V / 50-60 Hz	F20500421

## Accessori

				
A00001069 Asta di sostegno	A00000273 Calotta sferica per palloni 50 ml	A00000258 Calotta sferica per palloni 100 ml	A00001071 Calotta sferica per palloni 250 ml	A00001072 Calotta sferica per palloni 500 ml
				
A00001073 Calotta sferica per palloni 1000 ml				