


BAGNO TERMOSTATICO

Thermostatic bath



Modello / Model Codice / Code Codice CIVAB CIVAB code	M408-BM 02.1001 BTEMPZ48	M418-BM 02.1002 BTEMPZ41	M428-BM 02.1003 BTEMPZ42	M458-BM 02.1004 BTEMPZ45
DIMENSIONI INTERNE <i>INTERNAL DIMENSIONS</i>				
Volume nominale Lt. <i>Nominal volume Lt.</i>	8	18	28	58
Larghezza mm. <i>Width mm.</i>	246	260	435	540
Profondità mm. <i>Depth mm.</i>	150	298	298	502
Altezza mm. <i>Height mm.</i>	150	150	150	150
DIMENSIONI ESTERNE <i>OVERALL DIMENSIONS</i>				
Larghezza mm. <i>Width mm.</i>	474	500	674	792
Profondità mm. <i>Depth mm.</i>	177	325	325	540
Altezza mm. <i>Height mm.</i>	387	387	387	387
Controllo della temperatura <i>Temperature control</i>	Display digitale / Digital display			
Porta provette inseribili max <i>Max insertable test tube rack</i>	1	2	3	6
Potenza W <i>Power W</i>	500	800	1000	2000
Alimentazione V <i>Power supply V</i>	230	230	230	230
Peso Kg. <i>Weight Kg.</i>	9	14	18	25

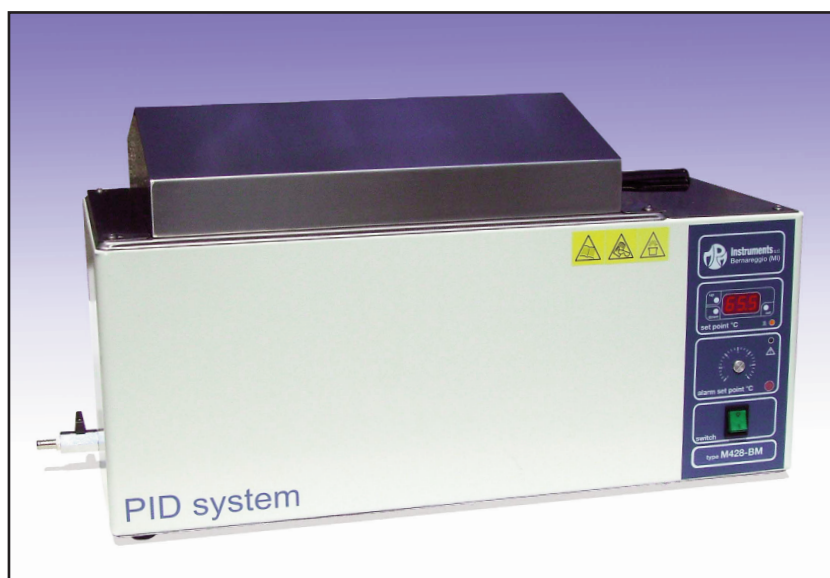

Accessorio / accessory

Accessori a richiesta pag. 28/29- Accessories pag. 28/29

Caratteristiche tecniche

- Bagni termostatici ad alto contenuto tecnologico adatti per tutte le applicazioni termostatiche, tipo test sierologici, batteriologici, in vitro, ecc.
- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Isolamento termico a doppia parete coibentata con fibra minerale naturale.
- Vasca interna in acciaio inox stampata con bordi arrotondati per agevolare la pulizia, rubinetto di scarico per i modelli da litri 18-28-58.
- Coperchio anti condensa in acciaio inox non incernierato per modello da litri 8.
- Coperchio anti condensa in acciaio inox incernierato per i modelli da litri 18-28-58.
- Controllo della temperatura tramite termoregolatore / programmatore digitale a P.I.D. con funzione Autotuning per garantire una buona stabilità.
- Range di temperatura da + 5°C (sopra ambiente) a + 99,9°C, stabilità interna $\pm 0,5^\circ\text{C}$ a + 37°C.
- Precisione display $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Termostato supplementare di sicurezza con allarme visivo e ripristino manuale.
- Per operare a temperature inferiori a quella ambientale necessita la serpentina di raffreddamento con circolazione di fluido (optional).
- Portaprovette (optional).
- Interruttore bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230 V - 50 Hz.
- Classe 2, DIN 12880.

Technical specifications

- Professional thermostatic baths ideal for all thermostatic applications, serological and bacteriological tests, slides etc.
- Outer body in steel treated with anti-acid epoxy paint.
- Double wall heat insulation with natural mineral fibre.
- Internal chamber in seamless stainless steel with rounded corners for efficient circulation and cleaning.
- Draining tap for 18-28-58 litres models.
- Anti-condensation lid in stainless not sinner for 8 liter model.
- Anti-condensation lid in stainless steel on hinge for 18-28-58 litre models.
- Digital P.I.D. thermostat / programmer to ensure good stability, Autotuning function.
- Temperature range from + 5°C above room temperature to + 99,9°C accuracy $\pm 0,5^\circ\text{C}$ to 37°C.
- Display precision $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Additional thermostat with visual allarm and manual resetting.
- For work below room temperature a cooling coil with fluid circulation is needed (optional).
- Test tube racks (optional).
- Illuminated two phase main switch.
- Power supply 230 V - 50 Hz.
- 2 class, DIN 12880.



MPM Instruments srl



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica