



Purificazione Acqua Purelab 7000




Descrizione

Acqua di straordinaria qualità per l'uso intensivo in attività generali di laboratorio con punti di dosaggio multipli.


PURELAB 3000 e 7000 sono soluzioni compatte per piccoli circuiti di distribuzione.

Sono ideali per una vasta gamma di attività di laboratorio, tra cui diluizione di campioni e preparazione del reagente, chimica generale, elettrochimica, spettroscopia, così come per il rifornimento di altri impianti di produzione di acqua ultrapura.

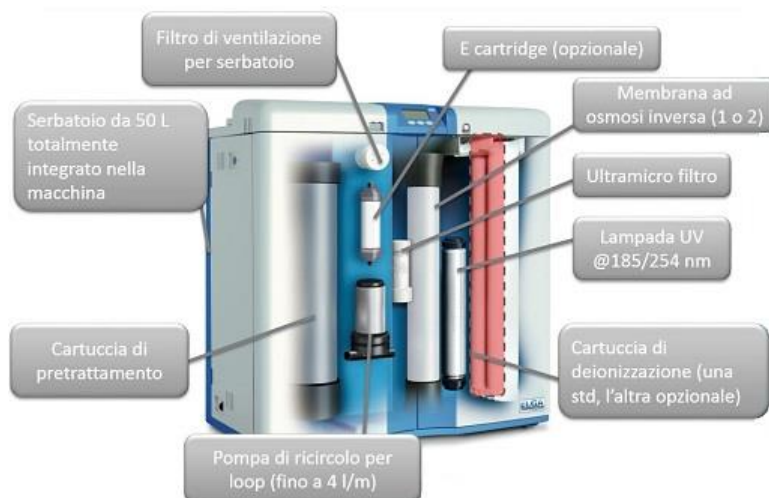

Caratteristiche:

- Erogazione fino a 4 litri/min. di acqua di Tipo II e III
- Produzione acqua con resistività superiore a 15 MΩ-cm, destinata ad usi generici di laboratorio
- Opzione di connessione a piccoli circuiti di distribuzione, per alimentare sistemi di acqua ultra pura e punti di dosaggio
- Garanzia di qualità dell'acqua, grazie a membrana RO e programma di igienizzazione del circuito di distribuzione
- Esclusiva miscela di resine, che aumenta il ciclo di vita del sistema e abbatte i costi di mantenimento
- Design compatto che garantisce massima flessibilità, facile da installare anche in piccoli spazi
- Servizi di collaudo e assistenza tecnica.
- Upgradabile, se si compra uno strumento con una membrana, si può installare l'altra anche successivamente all'acquisto.

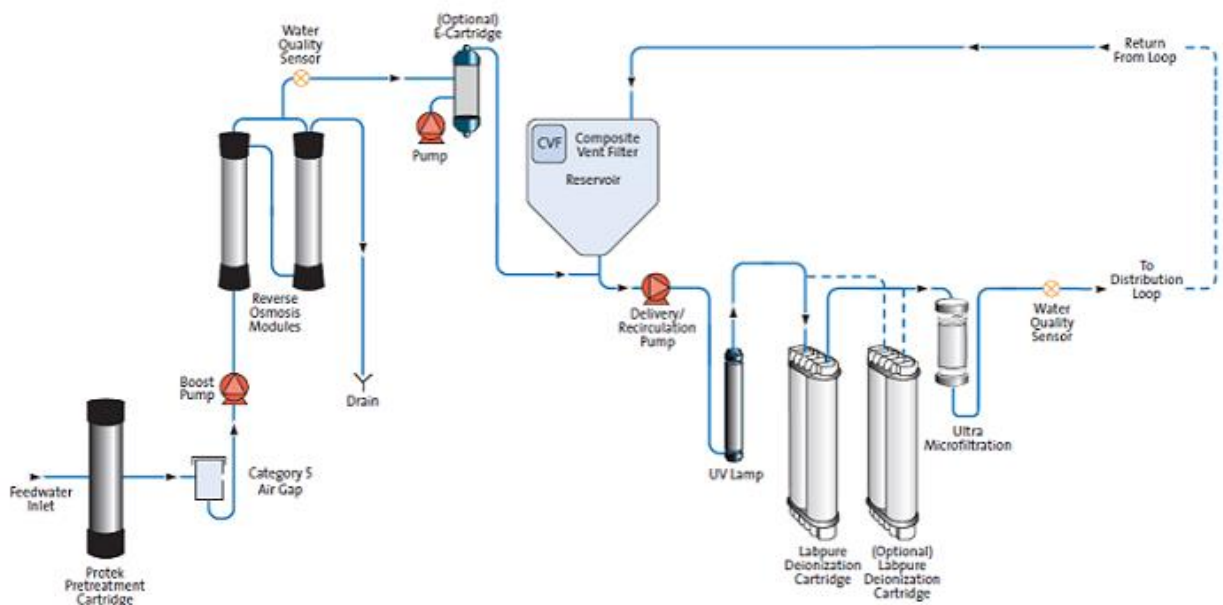

Dati Tecnici

Modello	PURELAB 7000
Acqua	Tipo 2
Alimentazione	Si alimenta con Acqua di rete
Produzione	60 l/h con 1 membrana 120 l/h con 2 membrane

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
PURELAB 7000 60LPH 115V	PB7060XXM1-115
PURELAB 7000 60LPH 230V	PB7060XXM1-230
PURELAB 7000 120LPH 115V	PB7120XXM1-115
PURELAB 7000 120LPH 230V	PB7120XXM1-230

Accessori

Descrizione	Codice
Starter Kits	
Purelab 7000 Starter Kit 1	LA729
Purelab 7000 Starter Kit 2	LA730
Consumabili per Purelab 7000	
Ultrafiltro micronico	LC109
Cartuccia pretrattamento Protek L1	LC175
Cartuccia pretrattamento Protek L2	LC177
Cartuccia RO 60 l / h	LC180
Cartuccia E	LC181
Purelab Purification Pack	LC187
Confezione da 12 compresse effervescenti di sanificazione	CT3
Confezione da 50 compresse effervescenti di sanificazione	CT3-50
6 Confezioni da 50 compresse effervescenti di sanificazione	CT3-300
Lampada UV	LC118
Accessori per Purelab 7000	
Kit di aggiornamento High Flow c / w LC187	LA723
Kit di aggiornamento Cartuccia E c / w LC181	LA701
Kit Upgrade 60 LPH a 120 LPH	LA703
Ruote	LA704
Serbatoio da 40 litri e controllo del livello 230V 50Hz	LA631
Serbatoio da 40 litri e controllo del livello 115V 60Hz	LA633
Stazione di erogazione a distanza (Compreso Dispense Gun)	LA643